




DiaMetra

SALIVA CONTROL

IVD



LOT
See external label

8°C
2°C 



$\Sigma = 3 \times 2\text{ml}$

REF DKO067

INTENDED USE

This product is intended for in vitro diagnostic use in the quality control of immunoassays using saliva samples

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

For in vitro diagnostic use only. Do not pipette by mouth. Exercise all normal precautions required for handling laboratory reagents.

Since no method can offer complete assurance of the absence of any infectious agents, this material and all patient samples should be handled as though capable of transmitting infectious diseases and should be disposed of accordingly. Health and Safety Data Sheets are available on request.

STORAGE AND STABILITY

OPENED: Store refrigerated at 2 to 8°C. Product is stable until the expiration date printed on the external label. Dispense only the required amount of product necessary to perform the work. After use, discard any unused product. DO NOT RETURN ANY UNUSED MATERIAL TO THE ORIGINAL VIAL.

UNOPENED: Store refrigerated at 2 to 8°C. Material is stable until the expiration date printed on each individual vial.

MATERIALS PROVIDED

Saliva control:
DCE039 3 x 2 ml.(low, medium, high)

EQUIPMENT REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Volumetric pipette

VALUE ASSIGNMENT

Each lot Batch of immunoassay controls is submitted to a number of reference laboratories and values are assigned from a consensus of results obtained by these laboratories. A mean value has been assigned to this lot of control using an ELISA method.


SALIVA CONTROL

IVD



LOT

See external label

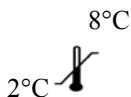

Σ = 3 X 2ml

REF DKO067

FINALITA' D'USO

Questo prodotto è inteso per l'uso diagnostico in vitro nel controllo qualità degli immunodosaggi su test salivari.

AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI

Solo per uso diagnostico. Non pipettare i materiali con le pipette a bocca. Rispettare le norme in vigore per la manipolazione dei reattivi da laboratorio.

Pur essendo il materiale di matrice sintetica, si raccomanda di trattare e smaltire il prodotto e tutti i campioni dei pazienti con cautela.

CONSERVAZIONE E STABILITA'

Aperto: conservare in frigo (2-8°C). Stabile fino alla data di scadenza stampata sulle fiale. Togliere solo la quantità di prodotto necessaria. Il prodotto eventualmente avanzato dopo l'uso non va rimesso nella fiala d'origine.

Chiuso: Conservare in frigo (2/8°C). Stabile fino alla data di scadenza stampata sulle fiale.

PREPARAZIONE PER L'USO

Il controllo per immunodosaggi è liquido.

1. Miscelare il contenuto della fiala per 5 minuti ruotando delicatamente. Evitare il formarsi di schiuma. Non scuotere..

3. Refrigerare il materiale non usato. Miscelare il contenuto accuratamente prima di riusarlo.

MATERIALI FORNITI

Saliva control:

DCE039 3 x 2 ml. (basso, medio, alto)

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI

Pipetta volumetrica

VALORI ASSEGNATI

Ciascun lotto di controllo per immunodosaggi è inviato a dei laboratori di riferimento e i valori sono assegnati da un consenso di risultati da loro ottenuti. A questo lotto di controlli è stato assegnato un valore (Media) usando un metodo ELISA